



PERSONAL CARE

Smart Body Fat Scale



Käyttöohje FI: 2-11

SISÄLLYS

TEKNISET TIEDOT	2
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA.....	3
YLEISTÄ.....	4
SOVELLUKSEN ASETUKSET	5
YHDISTÄMINEN	5
AIRSCALE-SOVELLUKSEEN KIRJAUTUMINEN	6
AIRSCALEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN	7
VAA'AN KÄYTTÄMINEN	8
VIRHEILMOITUKSET	10
PUHDISTUS JA HUOLTO.....	10
REKLAMAATIO-OIKEUS JA HUOLTO.....	11



TEKNISET TIEDOT

- Maksimikapasiteetti: 180 kg
- Minimikapasiteetti: 8 kg
- Punnitustarkkuus: 0,1 kg
- Mittayksiköt: kg, lb
- Paristot: 3 × 1,5 V AAA-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen)

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Lue koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöä. Tällä tavalla suojataan käyttäjää ja vältetään tuotevauriot.
- Poista ennen tuotteen käyttöönottoa kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, onko tuote vaurioitunut. Jos tuote on vaurioitunut tai et ole varma, onko tuote vaurioitunut, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit tuotteen. ÄLÄ käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä vaakaa muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen. Takuu raukeaa, jos vaakaa käytetään muuhun kuin käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.
- Tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos he ovat saaneet opastuksen laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heitä valvotaan.
- VAARA! Pakkaus on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. On olemassa tukehtumisvaara!
- VAROITUS! Älä yritä avata tai korjata tuotetta itse.
- Aseta vaakaa vakaalle, tasaiselle alustalle. Älä käytä vaakaa liukkaalla tai kostealla alustalla.
- Käsittele vaakaa varoen. Vältä kuormittamasta vaakaa, kun sillä ei olla punnitsemassa, äläkä laske sen päälle esineitä.
- Suojaa vaakaa kosteudelta.
- Älä päästä vaakaa kastumaan, sillä se voi vahingoittaa elektroniikkaa.
- Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.
- Puhdista vaakaa kostealla liinalla, mutta varmista, ettei laitteen sisälle pääse vettä.
- Älä astu vaa'alle märin jaloin tai kun vartalosi on märkä.
- Älä koskaan seiso vaa'an reunalla putoamisen välttämiseksi. Seiso aina vaa'an keskellä ja säilytä tasapaino.
- Vaaka on huipputarkka mittalaite. Älä hyppää vaa'an päälle tai tallo sitä. Älä yritä purkaa vaakaa. Käsittele vaakaa varoen, jotta se ei rikkoudu sitä siirrettäessä.
- Älä aseta painavia esineitä vaa'an päälle, kun se ei ole käytössä.
- Älä ylitä vaa'an enimmäiskuormaa.
- Vältä voimakkaita iskuja, kuumuutta, kylmyyttä, veden roiskumista ja äkillisiä tärähdyksiä. Vaaka on herkkä laite, joka on altis kaikille tahattomille ulkoisille vaikutuksille.
- Jatkuvien parannusten vuoksi valmistaja pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman ennakoilmoitusta.

YLEISIÄ OHJEITA

- Käytä vaakaa paljain jaloin. Älä pidä sukkia jalassa. Vaakaa saa käyttää vain paljain jaloin. Sukkien pitäminen jalassa voi estää yhteyden muodostumisen elektrodeihin.
- Varmista, että jalkasi ovat kuivat ja puhtaat. Varmista, että jalkasi ovat kuivat ja puhtaat, jotta yhteys elektrodeihin on optimaalinen ja mittaukset ovat tarkat.
- Seiso vaa'an päällä sen analyysin ajan.
- Kehonkoostumusmittaukset eivät ole luotettavia tietyillä käyttäjäryhmillä:

Huomautus: Kehon rasvaprocenttia ei voida mitata luotettavasti seuraavilta käyttäjäryhmiltä:

- Alle 10-vuotiaat lapset ja yli 80-vuotiaat henkilöt
- Urheilijat ja kehonrakentajat
- Henkilöt, jotka noudattavat tiukkaa ruokavaliota, ovat käyttäneet alkoholia, ovat juuri harrastaneet rasittavaa liikuntaa, käyttävät tiettyjä lääkkeitä (esim. diureetteja) tai ovat sairaita tai heillä on kuukautiset.

2

Sovelluksen ASETUKSET**Yhteensopivat älypuhelimien käyttöjärjestelmät**

Android 12.0 tai uudempi

iOS 14.0 tai uudempi

Sovelluksen lataus ja asennus

iPhone: Etsi App Storesta hakusanalla AIRSCALE

Android: Etsi hakusanalla AIRSCALE sovelluskaupasta (esim. SAMSUNG Store,

HUAWEI Store, XIAOMI Store, OPPO Store, VIVO Store ym.)


Lataa ja asenna sovellus ohjeiden mukaan.

**YHDISTÄMINEN**

Varmista, että Bluetooth ja paikannusominaisuus ovat käytössä.

Avaa sovellus, jolloin se muodostaa yhteyden automaattisesti.

AIRSCALE-SOVELLUKSEEN KIRJAUTUMINEN

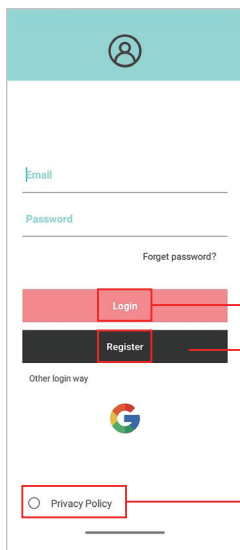

Kirjautuminen


Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi, jos sinulla on jo AIRSCALE-tili. Voit kirjautua palveluun myös Google-tilillä.

Tilin luominen

Jos sinulla ei ole olemassa olevaa tiliä tai Google-tiliä, voit luoda uuden tilin.

Tietosuojakäytäntö

Voit jatkaa, kun olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojakäytännön.

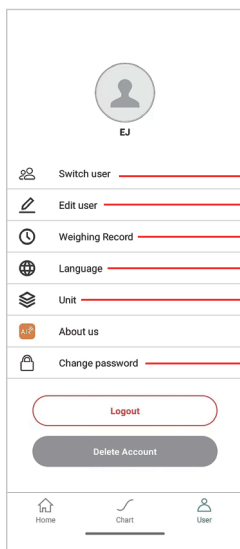

Vaihda käyttäjää: Luo tai poista käyttäjä.

Muokkaa käyttäjää: Muokkaa nykyisen käyttäjän tietoja. (Ilmoita oikeat tiedot saadaksesi tarkan tuloksen.)

Mittaustulokset: Katso aiempien punnitusten tiedot.

Kieli: Vaihda kieltä.


Mittayksikkö: Valitse kg tai lb.

Vaihda salasana: Vaihda nykyisen käyttäjän salasana.


3

AIRSCALEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Laitteen osat

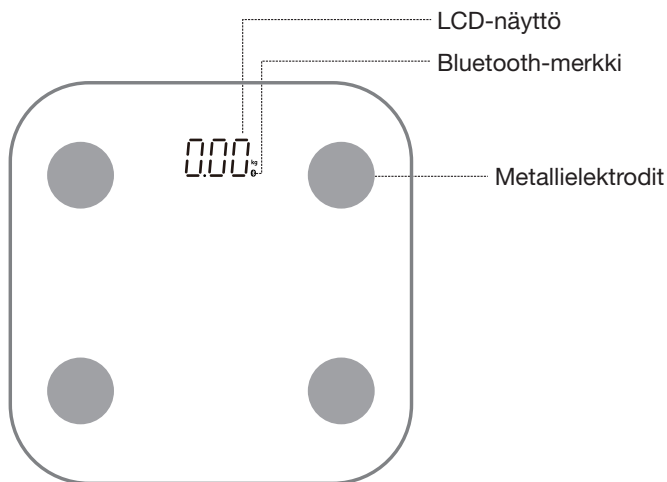

VAIHDA MITTAYSIKKÖÄ (kg/lb)

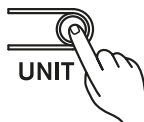

Mittayksiköt: kg – lb

Punnitus tilassa: Valitse mittayksikkö painamalla mittayksikköpainiketta. Painike sijaitsee vaa'an takapuolella.

Huomautus: Valitse haluamasi mittayksikkö ennen punnitusta. Mittayksikköä ei voi vaihtaa punnituksen aikana.

Mittayksikkö voidaan vaihtaa myös AirScale-sovelluksessa.

4

VAA'AN KÄYTTÄMINEN

Vaihe 1: Varmista, että laitteesi käyttöjärjestelmä on:

Android 12.0 tai uudempi

iOS 14.0 tai uudempi

Vaihe 2: Lataa AirScale-sovellus App Storesta tai Google Playsta ja rekisteröidy syöttämällä perustietosi.



Vaihe 3: Paina painiketta nopeasti ainakin kolme kertaa. Näytössä näkyy 0.0kg, kun siinä on ensin näkynyt numero 8.

(Kun näytössä näkyy  , aktivoi vaaka painamalla virtapainiketta nopeasti kolme kertaa).



Vaihe 4: Käynnistä puhelimen Bluetooth- ja paikannusominaisuudet.


Vaihe 5: Avaa AirScale-sovellus ja kirjaudu palveluun.




Vaihe 6: Seiso vaa'alla paljain jaloin ja varmista, että jalkasi koskettavat metallielektrodeja.

Pysy paikallasi liikkumatta, kunnes vaa'an näytössä näkyy 0000 ja puhelimen sovellus ilmoittaa analysoivansa.

Kun analyysi on valmis, vaaka näyttää painosi ja puhelimen sovellus paino- ja kehonkoostumustiedot.

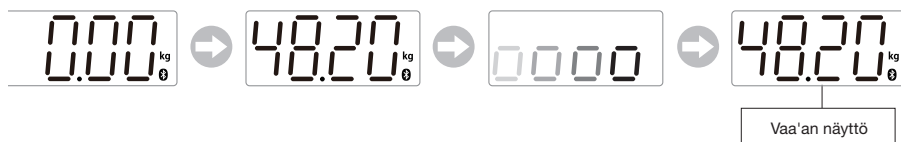

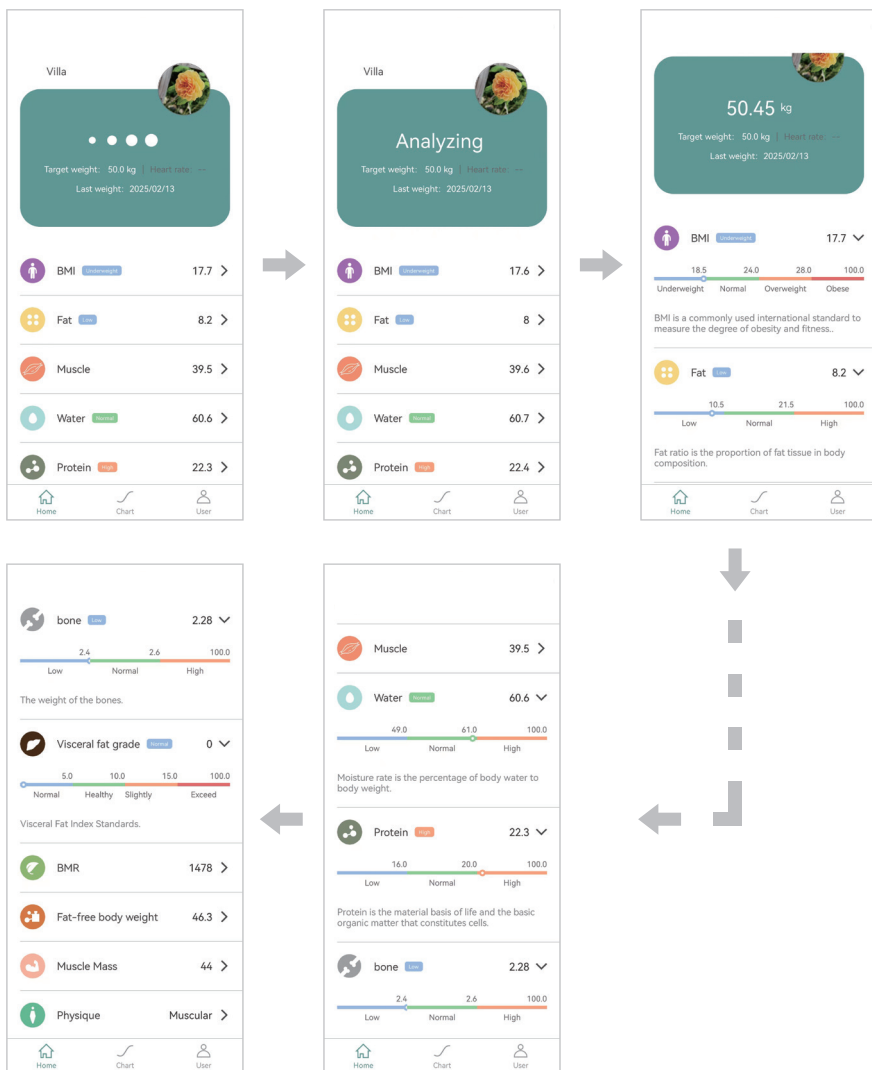

Huomautus:

- Tarkan tuloksen saamiseksi varmista, että jalkasi koskettavat kunnolla metallielektrodeja.
- Kun vaa'an näytössä näkyy vaihtuvia nollia (0), vaaka analysoi kehonkoostumusta. Jää seisomaan vaa'an päälle mittausvirheiden välttämiseksi.

5

VIRHEILMOITUKSET



Ylikuormitus

Jos vaa'an näytössä näkyy "Err", se tarkoittaa yli-kuormitusta (yli 180 kg).



Paristo loppumassa

Kun näytössä näkyy "Lo", vaaka sammuu automaattisesti kahden sekunnin jälkeen. Avaa paristokotelo ja vaihda paristot uusiin. Aseta paristot oikein päin.

6

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista vaaka kostealla liinalla. Älä päästä vettä sisään vaakaan.
- Älä käytä vaa'an puhdistukseen kemiallisia liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä.



Symboli tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen talousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa valtuutettuun jätehuoltopisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tällaista palvelua.

Ota yhteyttä omaan kuntaasi, jos tarvitset lisätietoja.

REKLAMAATIO-OIKEUS JA HUOLTO

Uudella laitteellasi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tämä koskee myös tuotteen puutteellista puhdistusta
- Tuotteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta.

Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden 'Huolto'.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

