



PERSONAL CARE

Smart Body Fat Scale



Bruksanvisning NO: 2-11

INNHold

SPESIFIKASJONER	2
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER	3
GENERELT	4
APP-INNSTILLINGER	5
TILKOBLING	5
LOGG PÅ AIRSALE-APPEN	6
KOM I GANG MED AIRSCALE	7
SLIK VEIER DU DEG	8
FEILVISNINGER	10
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	10
REKLAMASJONSRETT OG SERVICE	11



SPESIFIKASJONER

- Maks kapasitet: 180 kg / 390 lb
- Min. kapasitet: 8 kg / 17,6 lb
- Måleintervall: 0,1 kg / 0,2 lb
- Enhet: kg, lb
- Strøm: 3 × 1,5V AAA-batterier (medfølger ikke)

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

- Les hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk. På denne måten beskyttes brukeren, og man unngår produktskade.
- Fjern all emballasje, og inspiser produktet for skader før du tar det i bruk. Hvis produktet er skadet, eller du er usikker på om apparatet er skadet, kontakt forhandleren der produktet er kjøpt. Du må IKKE ta produktet i bruk hvis det er skadet.
- Bruk ikke vekten til annet enn tiltenkt formål. Garantien bortfaller ved bruk av vekten til formål som ikke er beskrevet i bruksanvisningen.
- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med begrensede, fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring/kunnskap, hvis de er under tilsyn eller er instruert i sikker bruk av produktet og har forstått farene som er involvert.
- Barn må ikke leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er over 8 år og er under tilsyn.
- FARE! Emballasje skal oppbevares utilgjengelig for barn. Risiko for kvelning!
- FORSIKTIG! Forsøk aldri å åpne og/eller reparere produktet selv.
- Sett vekten på et fast, jevnt underlag. Bruk aldri vekten på et glatt eller vått underlag.
- Håndter vekten forsiktig. Unngå å belaste vekten når du ikke foretar en veiing, og plasser ikke gjenstander på vekten.
- Beskytt vekten mot fukt.
- Sørg for at vekten ikke blir gjennomvåt av vann, da dette kan skade elektronikken.
- Bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler.
- Rengjør vekten med en lett fuktet klut, men sørg for at det ikke kommer vann inn i vekten.
- Tråkk ikke på vekten med våte føtter eller våt kropp.
- Still deg aldri på kanten av vekten for å unngå fall. Still deg alltid midt på vektflaten – hold balansen.
- Vekten er et måleutstyr med høy presisjon. Ikke hopp og tramp på vekten. Forsøk ikke å plukke vekten fra hverandre. Håndter vekten forsiktig, så den ikke går i stykker når du flytter den.
- Legg ikke tunge ting på vekten når den ikke er i bruk.
- Overskrid ikke maksimal belastning på vekten.
- Unngå sterke påvirkninger, kraftig varme, kulde, vann og plutselige rystelser. Vekten er en skjør konstruksjon som er sensitiv for alle utilsiktede ytre påvirkninger.
- På grunn av kontinuerlige forbedringer forbeholder produsenten seg retten til å foreta produktendringer uten forutgående varsel

GENERELT

- Bruk vekten med bare føtter. Bruk ikke sokker. Vekten må kun brukes med bare føtter. Bruk av sokker kan forhindre korrekt kontakt med elektrodene.
- Pass på at føttene er tørre og rene. Sørg for at føttene dine er tørre og rene for å sikre optimal kontakt med elektrodene og presise målinger.
- Bli stående på vekten mens den analyserer.
- Kroppsanalyseverdiene er ikke pålitelige for enkelte brukergrupper:

Merk: Måling av kroppsfett er ikke pålitelig hos følgende brukergrupper:

- barn under 10 år og eldre over 80 år
- atleter og kroppsbyggere
- personer som følger en streng diett, har drukket alkohol, har mosjonert hardt, tar enkelte typer medisiner (f.eks. vanndrivende) eller er syke eller menstruerende.

2

App-INNSTILLINGER

Kompatible operativsystemer

Android 12.0 eller nyere

iOS 14.0 eller nyere

Last ned og installer appen

iPhone: Søk etter «AIRSCALE» i App Store

Android: Søk etter «AIRSCALE» i app-butikker, f.eks. SAMSUNG Store, HUAWEI Store, XIAOMI Store, OPPO Store, VIVO Store osv.)


Følg programvareveiledningen for å laste ned og installere appen.

**TILKOBLING**

Sørg for at Bluetooth og stedstjenester er aktivert.

Åpne appen. Forbindelsen skjer automatisk.

LOGG PÅ AIRSCALE-APPEN

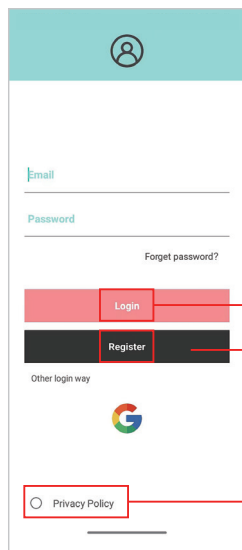

● Pålogging


Skriv inn e-postadressen din og passordet ditt hvis du allerede har en AIRSCALE-konto. Du kan også logge på med Google-kontoen din.

● Registrering

Hvis du ikke har en eksisterende konto eller en Google-konto, kan du opprette en ny.

● Retningslinjer for personvern

Les og godta retningslinjene for personvern for å fortsette.

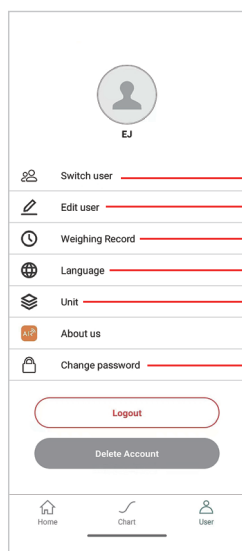

● Bytte bruker: Opprett eller slett bruker.

● **Rediger bruker:** Rediger opplysningene for den aktuelle brukeren. (Skriv inn korrekte opplysninger for å få et presist resultat.)

● **Vektregistreringer:** Se detaljer om hver historisk veiing.

● **Språk:** Skift språk.


● **Enhet:** Bytt mellom kg og lb.

● **Bytt passord:** Endre passord for den aktuelle brukeren.


3

KOM I GANG MED AIRSCALE

Oversikt over vekten

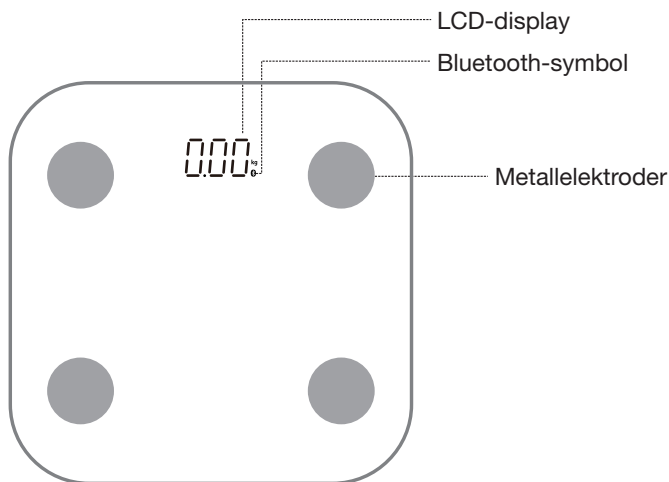

ENDRE ENHET (kg/lb)

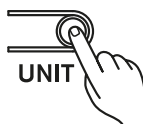

Enhetsmuligheter: kg – lb

I veiemodus: Trykk på enhetsknappen for å velg måleenhet.

Knappen sitter på baksiden av vekten.

Merk: Still inn ønsket måleenhet før du veier deg.

Enheden kan ikke endres under veiing.

Du kan også endre enheten i «AirScale»

4

SLIK VEIER DU DEG

Trinn 1: Sørg for at du har operativsystemet:

Android 12.0 eller nyere
iOS 14.0 eller nyere

Trinn 2: Last ned AirScale-appen fra App Store eller Google Play, og registrer deg ved å skrive inn grunnleggende opplysninger om deg selv.



Trinn 3: Trykk raskt på knappen minst 3 ganger. Skjermen viser «0,0 kg» etter først å ha vist «8».

(Når skjermen viser «», trykker du raskt 3 ganger på på/av-knappen for å aktivere vekten).



Trinn 4: Aktiver Bluetooth og stedstjenester på din telefon.

Trinn 5: Åpne AirScale-appen, og logg på.




Trinn 6: Stå på vekten med bare føtter, og sørg for full kontakt med metallektrodenes.

Bli stående uten å bevege deg, til det vises «0000» på vekten, og telefonen viser «analyserer».

Når analysen er ferdig, vises vekten din, og telefonen viser informasjon om vekt og kroppsfett.



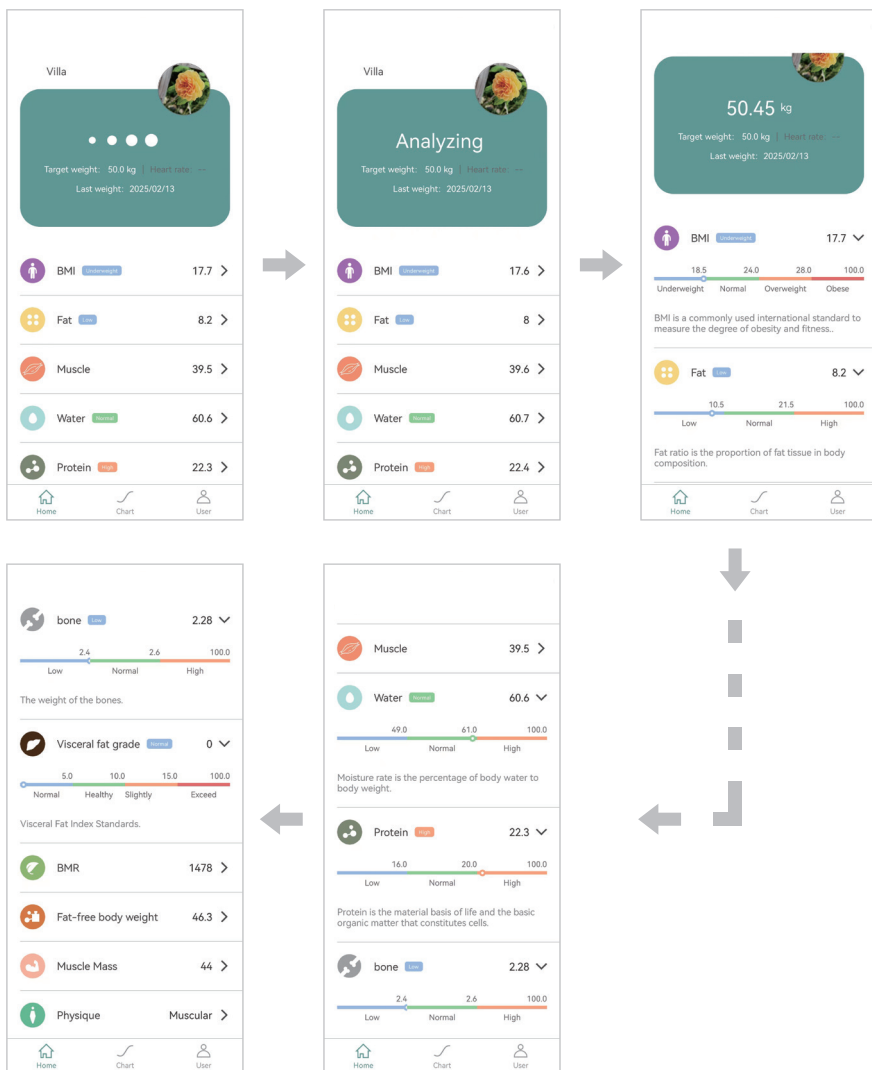

Merk:

- For et presist resultat må du sørge for at føttene dine har god kontakt med metall-elektrodenes.
- Når vektdispletet viser skiftende nuller («0») på displayet, analyserer vekten kroppsfett. Bli stående på vekten for å unngå feilmålinger.

5

FEILVISNINGER



Overbelastning

Viser vekten «Err» på displayet, betyr dette overbelastning (mer enn 180 kg).



Lavt batterinivå

Når displayet viser «Lo», slår vekten seg automatisk av etter 2 sekunder.

Åpne batteridekselet, og bytt ut batteriene med nye i korrekt polaritet.

6

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør vekten med en lett fuktet klut. La det ikke trenge inn vann i vekten.
- Bruk ikke kjemiske løsemidler, som f.eks. alkohol eller benzen til rengjøring av vekten.



Symbolet betyr at produktet ikke bør kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall, men i stedet avleveres på en autorisert avfallsplass som er beregnet til formålet, eller til en forhandler som yter slik service.

Kontakt kommunen du bor i hvis du vil ha mer informasjon.

REKLAMASJONSRETT OG SERVICE

Der ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialefeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. ned opplysningene ned i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialefeil
- Ved mangelfullt vedlikehold – dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Hvis der er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre slitedeler

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Proffkjøp

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med proffkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge, kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt.

Reklamasjon kan også meldes inn på witt.no under fanen 'Service'.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskaader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.

