



PERSONAL CARE

Smart Body Fat Scale



Bruksanvisning SE: 2-11

INNEHÅLL

SPECIFIKATIONER.....	2
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
ALLMÄNT	4
APPINSTÄLLNINGAR	5
ANSLUTNING.....	5
LOGGA IN I AIRSCALE-APPEN	6
KOM IGÅNG MED AIRSCALE	7
SÅ VÄGER DU DIG	8
FELINDIKERINGAR	10
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	10
REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE	11

1

SPECIFIKATIONER

- Maxkapacitet: 180 kg/390 lb
- Minkapacitet: 8 kg/17,6 lb
- Mätintervall: 0,1 kg/0,2 lb
- Enhet: kg, lb
- Ström: 3 × 1,5 V AAA-batterier (medföljer inte)

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs igenom hela bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. På så sätt skyddas användaren och man undviker skada på produkten.
- Innan produkten tas i bruk ska allt emballage tas bort och produkten ska undersökas för att se om den är skadad. Om produkten är skadad, eller om det råder tvivel om produkten har en skada, kontaktas den butik där produkten är inköpt. Du får INTE använda produkten om den är skadad.
- Använd inte vågen till något annat än det avsedda ändamålet. Garantin upphör att gälla om vågen används för andra ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen.
- Produkten får användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller får instruktioner om säker användning av produkten och om de har förstått de risker som är förknippade med den.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och hålls under uppsikt.
- FARA! Emballage ska förvaras oåtkomligt för barn. Risk för kvävning!
- VAR FÖRSIKTIG! Försök aldrig att öppna och/eller reparera produkten själv.
- Ställ vågen på ett fast och plant underlag. Använd aldrig vågen på ett halt eller vått underlag.
- Hantera vågen varsamt. Undvik att belasta vågen när du inte utför en vägning och placera inga föremål på vågen.
- Skydda vågen mot fukt.
- Se till att vågen inte blir genomblöt av vatten, eftersom det kan skada elektroniken.
- Använd inte kemiska rengöringsmedel.
- Rengör vågen med en lätt fuktad trasa, men se till att inget vatten kommer in i vågen.
- Kliv inte upp på vågen med våta fötter eller våt kropp.
- Ställ dig aldrig på kanten av vågen, för att undvika risken för fall. Ställ dig alltid mitt på vågen – håll balansen.
- Vågen är en mätanordning med hög precision. Hoppa inte och stampa inte på vågen. Försök inte att ta isär vågen. Hantera vågen försiktigt så att den inte går sönder när den flyttas.
- Placera inte tunga föremål på vågen när den inte används.
- Överskrid inte den maximala belastningen för vågen.
- Undvik stark påverkan, hög värme, stark kyla och vatten samt plötsliga skakningar. Vågen är en ömtålig konstruktion som är känslig för all yttre påverkan.
- På grund av kontinuerliga förbättringar förbehåller sig tillverkaren rätten att utföra produktändringar utan föregående meddelande.

ALLMÄNT

- Använd vågen med bara fötter. Bär inte strumpor. Vågen bör endast användas med bara fötter. Användning av strumpor kan förhindra korrekt kontakt med elektroderna.
- Se till att fötterna är torra och rena. Se till att dina fötter är torra och rena för att säkerställa optimal kontakt med elektroderna och korrekta mätningar.
- Stå kvar på vågen medan den analyserar.
- Kroppssammansättningsvärdena är inte tillförlitliga för vissa användargrupper:

Observera! • Mätningen av kroppsfett är inte tillförlitlig för vissa användargrupper:

- barn under 10 år och äldre över 80 år
- elitidrottare och kroppsbyggare
- personer som följer en strikt diet, har druckit alkohol, nyligen har tränat hårt, tar vissa mediciner (till exempel vätskedrivande) eller är sjuka eller har mens.

2

APPINSTÄLLNINGAR

Kompatibelt smartphonesystem

Android 12.0 eller senare

iOS 14.0 eller senare

Ladda ned och installera appen

iPhone: Sök efter "AIRSCALE" i App Store

Android: Sök efter "AIRSCALE" i appbutiker som (SAMSUNG Store, HUAWEI Store, XIAOMI Store, OPPO Store, VIVO Store osv.)

Följ programvaruinstruktionerna för att ladda ned och installera appen.

**ANSLUTNING**

Se till att Bluetooth och platstjänster är aktiverade.

Öppna appen så sker anslutningen automatiskt.

LOGGA IN I AIRSCALE-APPEN

Header: User icon

Form fields: Email, Password

Links: Forgot password?, Other login way (Google logo)

Buttons: Login, Register

Footer: Privacy Policy

• Inloggning

Ange din e-postadress och ditt lösenord om du redan har ett AIRSCALE-konto. Du kan också logga in med ditt Google-konto.

• Registrering

Om du inte har ett befintligt konto eller ett Google-konto kan du skapa ett nytt.

• Integritetspolicy

Läs och godkänn integritetspolicyn för att kunna fortsätta.

Header: User profile icon (EJ)

Settings list: Switch user, Edit user, Weighing Record, Language, Unit, About us, Change password

Buttons: Logout, Delete Account

Bottom navigation: Home, Chart, User

• Ändra användare: Skapa eller ta bort användare.

• **Redigera användare:** Ändra uppgifter för den aktuella användaren. (Ange rätt uppgifter för att få ett korrekt resultat.)

• **Viktregistreringar:** Se information om varje historisk vägning.

• **Språk:** Ändra språk.


• **Enhet:** Växla mellan kg och lb.

• **Ändra lösenord:** Ändra lösenordet för den aktuella användaren.


3

KOM IGÅNG MED AIRSCALE

Översikt över vågen

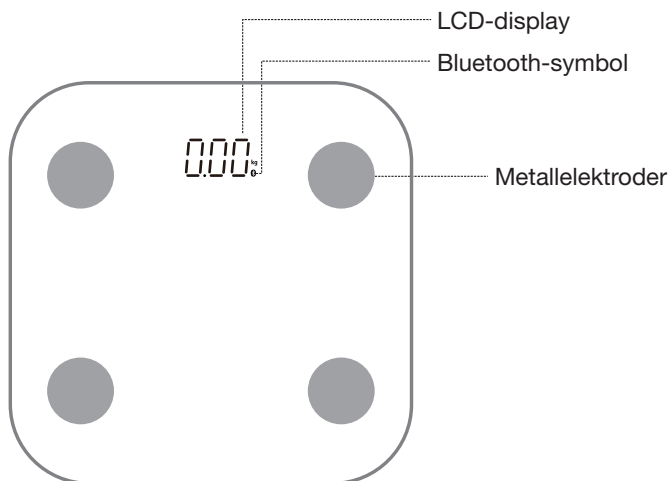

VÄXLA ENHET (kg/lb)

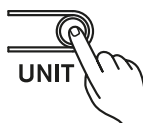

Enhetsalternativ: kg – lb

I vägningsläge: Tryck på enhetsknappen för att välja måttenhet.
Knappen sitter på baksidan av vågen.

Observera! Ställ in önskad måttenhet innan du väger dig.
Enheten kan inte ändras under vägning.

Du kan också ändra enheten i "AirScale"

4

SÅ VÄGER DU DIG

Steg 1: Se till att ditt operativsystem är:

Android 12.0 eller senare

iOS 14.0 eller senare

Steg 2: Ladda ned AirScale-appen från App Store eller Google Play och registrera dig genom att ange din grundläggande information.



Steg 3: Tryck snabbt på knappen minst 3 gånger. Skärmen visar "0,0 kg" efter att först ha visat "8".

(När skärmen visar "  ", tryck snabbt på strömbrytaren 3 gånger för att aktivera vågen).



Steg 4: Aktivera Bluetooth och platstjänster på din telefon.

Steg 5: Öppna AirScale-appen och logga in.




Steg 6: Ställ dig på vågen med bara fötter och se till att du får full kontakt med metallektrodena.

Stå kvar utan att röra dig tills "0000" visas på vågen och telefonen visar "analyserar".

När analysen är klar visas din vikt och telefonen visar vikt och kroppsfettprocent.



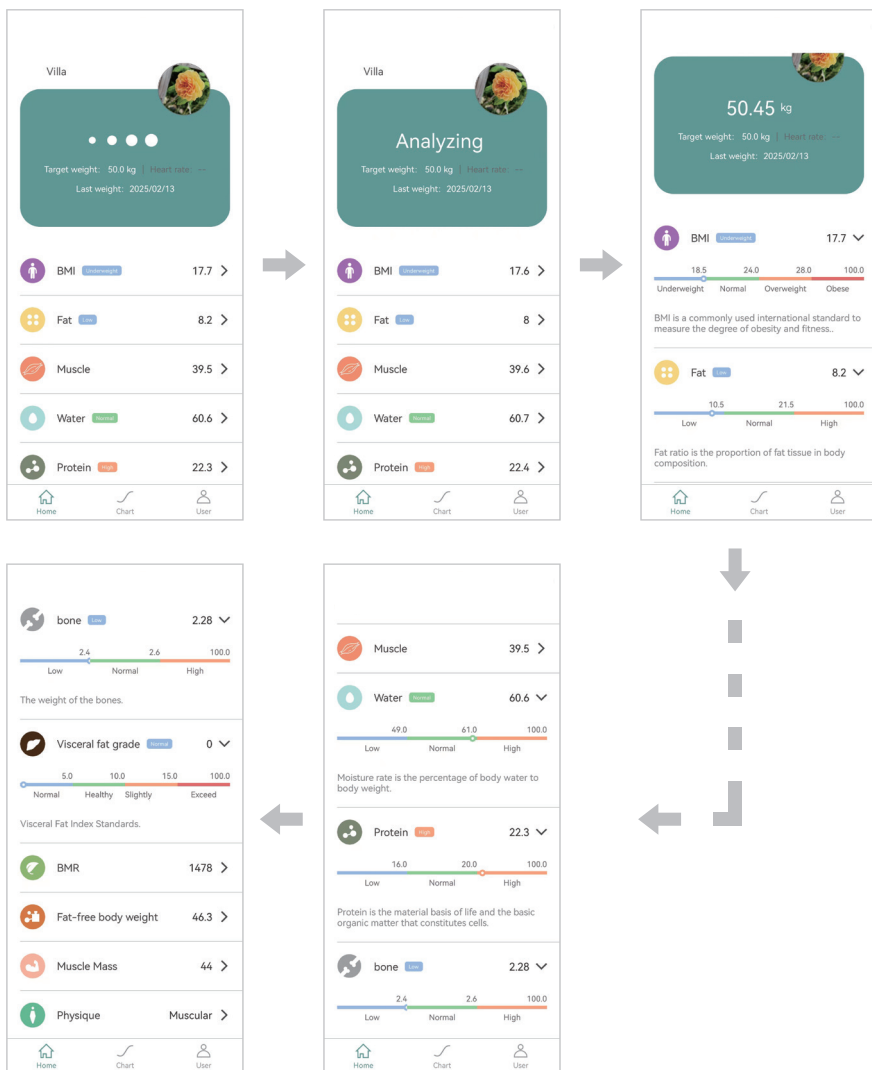

Observera!

- För ett exakt resultat ska du se till att dina fötter har god kontakt med metallektrodena.
- När vågens display visar alternerande nollor ("0") beräknar vågen kroppsfettprocenten – stå kvar på vågen för att undvika felmätningar.

5

FELINDIKERINGAR



Överbelastning

Om "Err" visas på vågens display indikerar detta överbelastning (mer än 180 kg).



Låg batterinivå

När displayen visar "Lo" stängs vågen av automatiskt efter 2 sekunder.

Öppna batteriluckan och byt ut batterierna mot nya med polerna vända åt rätt håll.

6

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra vågen. Låt inte vatten tränga in i vågen.
- Använd inte kemiska lösningsmedel som till exempel alkohol eller bensen för att rengöra vågen.



Symbolen betyder att produkten inte bör kastas med vanligt hushållsavfall, utan i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral som är avsedd för detta ändamål eller till en återförsäljare med en sådan service.

Kontakta din hemkommun om du behöver mer information.

REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service ska du upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Notera ev. dessa upplysningar här i bruksanvisningen, så du dem lätt tillgängliga. Det gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som uppkommit på grund av fabrikations- och materialfel.
- Vid misskötsamt underhåll – däribland även gäller bristande rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Om man använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
- Om inte installationen genomförts enligt anvisningarna
- Om inte auktoriserad fackman har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andre förslitningsdelar

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i privata hushåll, men som används i kommersiella sammanhang eller liknande (restaurang, café, kantin etc.) eller används till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I förbindelse med kommersiella inköp frångår garantin eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt.

Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

